

Procedura guidata di aggiornamento software Blue Force versione 2.0 e superiori

Il presente aggiornamento richiede che sul vostro computer sia già installata una versione 2.0 o successiva del software Blue Force.

Se si desidera aggiornare il software Blue Force versione da 1.0 a 1.2 richiedere un CD di installazione del nuovo software al vostro rivenditore o direttamente a Microtronics (blueforce@microtronics.it) specificando modello e numero di serie dello strumento acquistato.

1. Avviare “BFupgrade2xx_it.exe”.



2. Selezionare il modello di strumento utilizzato e quindi premere “Avanti”. Per facilitare la selezione del corretto modello di strumento fare riferimento al codice dell’articolo riportato nella targhetta sul retro dello strumento. Di seguito una breve descrizione dei tre gruppi in cui vengono suddivisi i vari modelli di strumento:

- **Blue Force (art. 50V001B):** è il modello più recente dello strumento Blue Force (prodotto da Settembre 2005) dotato del dispositivo “Plug&Go” come interfaccia Bluetooth per PC.
- **Blue Force (art. 50V001) e Blue Force 2 (art. 50V001D):** strumenti dotati di “Dongle Key + software Widcom” come interfaccia Bluetooth per PC.
- **Speed Force (art. 50V001T e art. 50V001S):** strumenti che si interfacciano al PC tramite porta seriale o adattatore USB/seriale.


ATTENZIONE!!!

La selezione del modello corretto consente di configurare correttamente la modalità di comunicazione del software verso lo strumento.

La scelta del tipo di strumento con cui il software deve comunicare può essere modificata anche successivamente all'interno del programma accedendo al menu “Info” (File\Impostazioni\Info) ed effettuando la selezione del modello appropriato (vedi figura sotto).



3. Ricerca cartella di installazione: la procedura di aggiornamento esegue una ricerca di una versione valida del software Blue Force che va a buon fine solo se l'installazione è avvenuta nella directory di default. In caso contrario permette di andare a selezionare la cartella in cui è presente l'eseguibile del software Blue Force.
4. Aggiornamento del software alla versione 2.xx se è stata rilevata e/o selezionata una installazione di una precedente versione del software Blue Force 2.xx è possibile eseguire l'aggiornamento del software (vedi figura sotto).

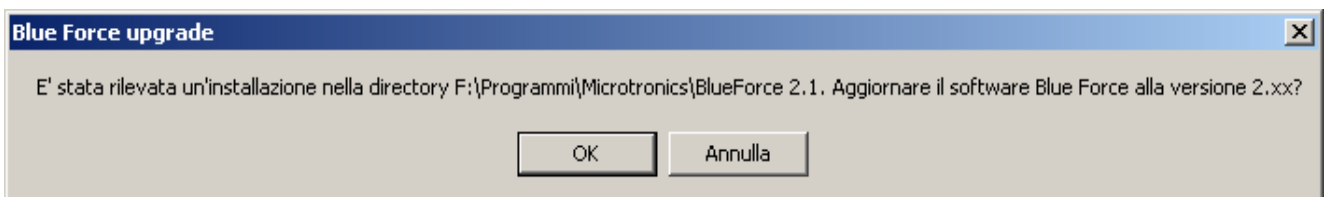

5. Conclusione dell'aggiornamento: se la procedura di upgrade viene portata a termine con successo (vedi figura sotto) al prossimo avvio del software Blue Force saranno disponibili tutte le nuove funzioni.

